

1. Eerste hulp bij ongevallen met het hoorapparaat


Het hoorapparaat is nat

Hoorapparaten kunnen niet tegen water. Is het apparaat toch nat geworden, open dan onmiddellijk de batterijkamer, verwijder de batterij en leg het hoorapparaat met een droogtablet in een afgesloten potje/doos. Maak zo snel mogelijk een afspraak met de audioloog.



Wat mag je zeker niet doen?

Leg het hoorapparaat **niet op een warmtebron** (bv. de verwarming).

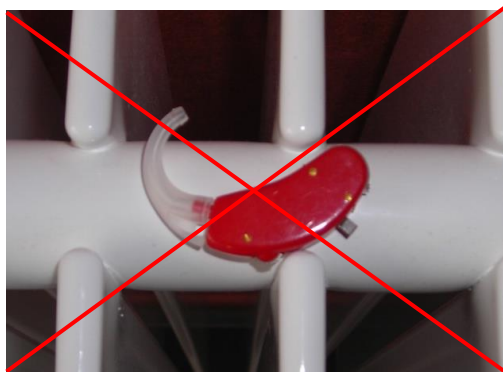


Droog het hoorapparaat **niet met een haardroger**



Het elleboogje is gedraaid of zit los

Draai of klik het elleboogje voorzichtig terug vast. Lukt dit niet, dan moet het vervangen worden door een nieuw. Elleboogjes zijn verkrijgbaar bij de audioloog.

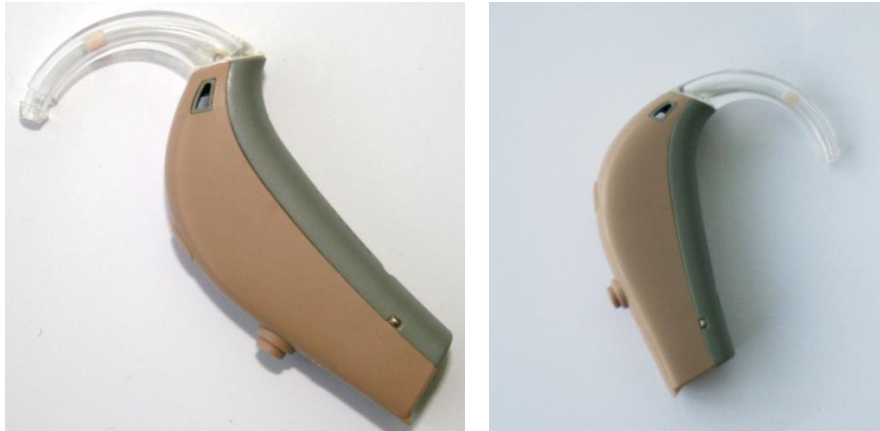

Het hoorapparaat is gevallen

1. **Controleer** of het hoorapparaat **nog werkt**.
Beluister het hoorapparaat indien mogelijk met een **lier** (verkrijgbaar bij de audioloog).



2. Controleer of de **batterij nog goed zit**.
3. Contacteer de **audioloog** indien het hoorapparaat niet meer werkt.